



Chemische Charakterisierung:

Universal-UZF: Polyethylen (PE). Physiologisch unbedenklich. Wasserunlöslich. Geruchsfrei. Inaktiv - keine Gefahr für das Grundwasser. Schadstoffarme, energiereiche Verbrennung.

Materialeigenschaften: Dünne, gut tiefziehbare Folie. Verbindet sich nicht mit Erkodent-Tiefziehmaterialien.

Empfehlung: Universal-UZF ist besonders für Erkoflex geeignet.


Einsatzgebiet: Zum Isolieren von Erkoflex gegen Gips, zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten auf der Gipsoberfläche, für eine glattere, transparentere und hygienische Innenoberfläche. Nach dem Tiefziehen rückstandslos abziehbar.

Anwendung:

Folie (z. B. Erkoflex)

Universal-UZF

Modell

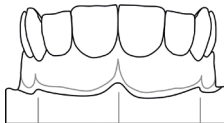


Universal-UZF bei der Verwendung mit Erkoflex vor dem Tiefziehen auf die Tiefziehplatte auflegen und die Luft ausstreichen, nicht perforieren. Beide Folien zusammen plastifizieren. Folie hängt durch und spannt sich wieder, dann tiefziehen. Wird Universal-UZF mit anderen Erkodent-Folien verwendet, Universal-UZF zur Vermeidung von Luftpolstern perforieren (ca. 3-5 Perforationen). Beide Folien zusammen plastifizieren. Wenn Tiefziehfolie plastifiziert ist (siehe jeweilige Verarbeitungsanleitung), tiefziehen.

Lieferform:

53 11 09 50 Stück Ø120 mm 0,1 mm

Achtung: Folien haften stark aneinander. Fest in die Hände nehmen und gegeneinander verschieben, damit sie sich voneinander trennen.

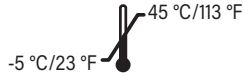

Chemical characteristics:

Universal-UZF: Polyethylene (PE). Physiologically harmless. Insoluble in water. Odourfree. Inactive – harmless to ground water. Combustion low in pollutants and high in energy.

Material characteristics:

Thin foil, well thermoformable. Does not bond to Erkodent thermoforming materials.

Recommendation: Universal-UZF is especially suitable for Erkoflex.


Field of use: To insulate Erkoflex against plaster. To even out small roughnesses on the plaster surface, for a smoother, more transparent and hygienic inner surface. Can be taken off without residues after thermoforming.

Application:

Foil (for example Erkoflex)

Universal-UZF

Model

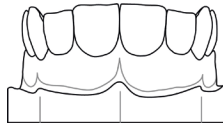

Before thermoforming together with Erkoflex put the **Universal-UZF** on the foil and smooth out the air, do not perforate. Plastify both foils together. Foils sags and stretches again, then thermoform. If the Universal-UZF is used with other Erkodent foils, perforate Universal-UZF in order to avoid air cushions (app. 3-5 perforations). Plastify both foils together. When the thermoforming foil has plastified (s. corresponding instructions for use), thermoform.

Supplies:

53 11 09 50 pieces Ø120 mm 0.1 mm

Attention: Foils adhere to each other strongly. Take them into the hands and move them against each other so that they separate.